



● CHROMagar™ VRE



Click below:

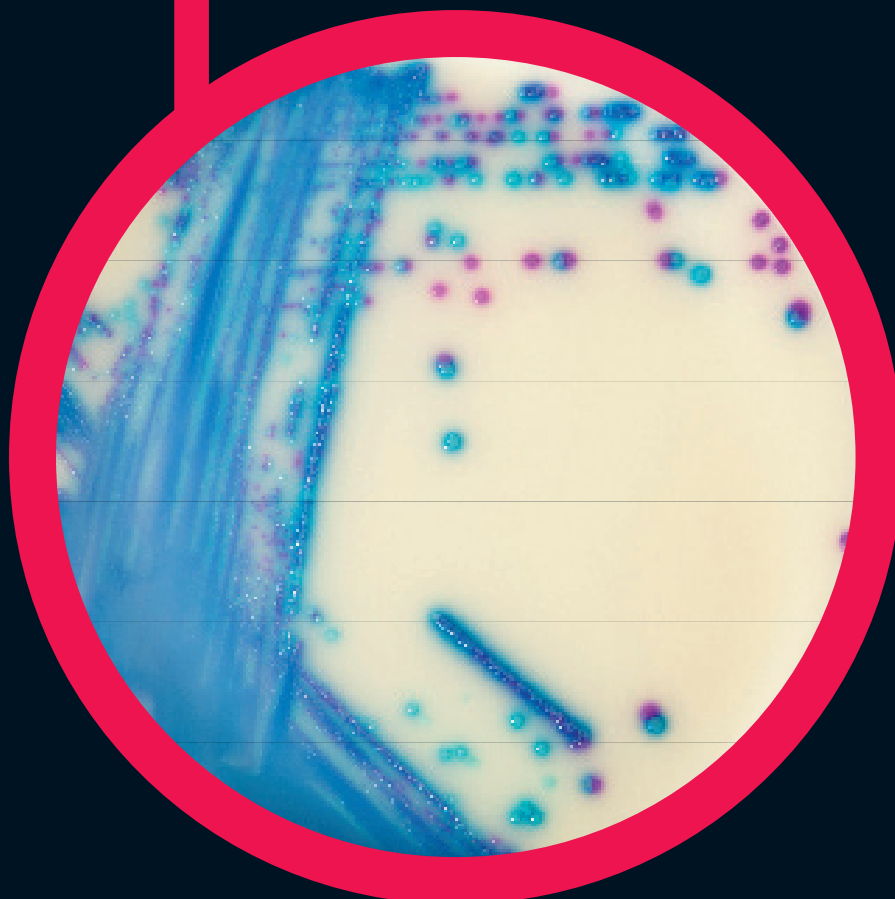

● CHROMagar™
VRE

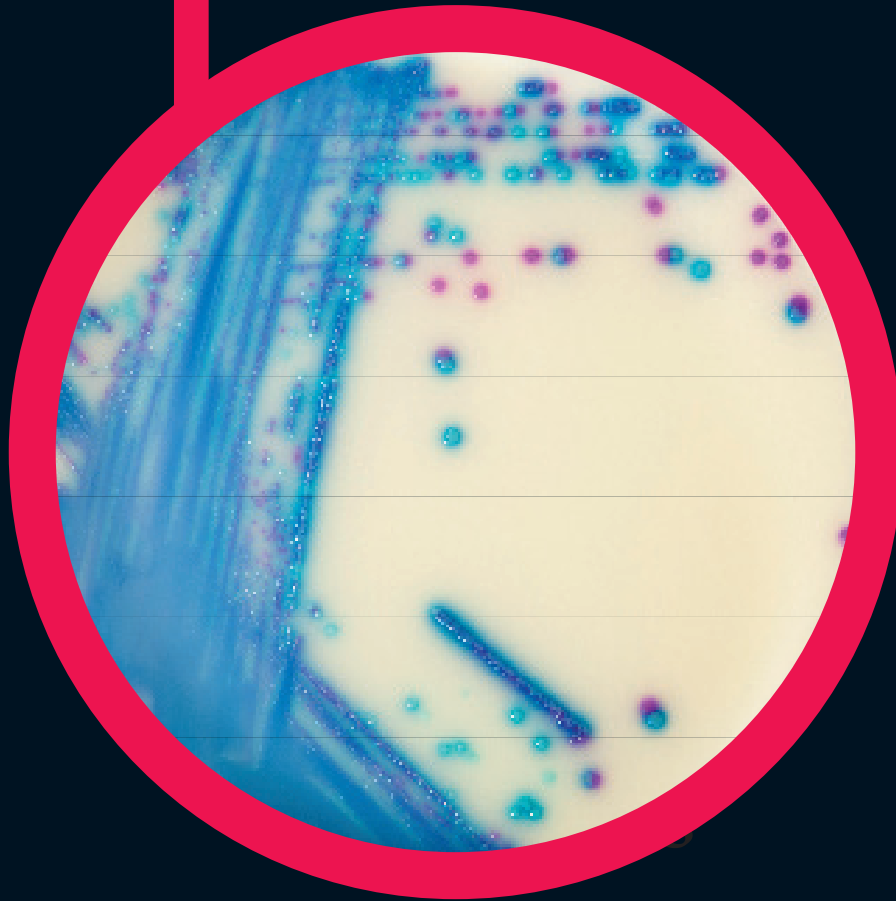

For detection of Van A/Van B
VRE. faecalis & *VRE. faecium*

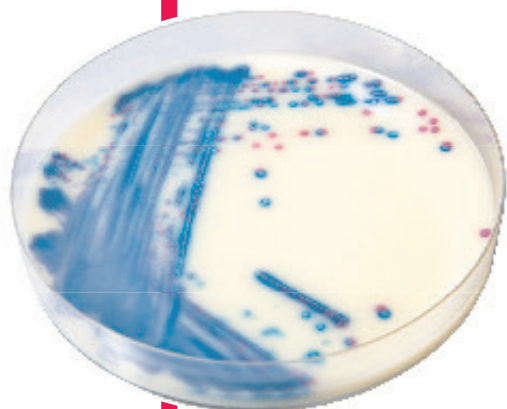


Plate Reading

- VRE. *faecalis*/VRE. *faecium*
→ pink to mauve
- *E. gallinarum*/*E. casseliflavus*
→ blue or inhibited
- Other bacteria
→ inhibited



For detection of Van A/Van B VRE. *faecalis* & VRE. *faecium*

Background

There are two types of vancomycin resistance in *Enterococci*. The first type is intrinsic resistance (mostly Van C type but also Van D, Van E, Van F etc) found in *E. gallinarum* and *E. casseliflavus*/*E. flavescens* and demonstrates a low-level resistance to vancomycin. The second type of vancomycin resistance in *enterococci* is acquired resistance (Van A & Van B types), mostly seen in *E. faecium* and *E. faecalis*. Therefore, to avoid the spread of this resistance to more virulent pathogens (*S. aureus*, for instance) it is crucial to promptly detect the presence of any of these two species in the patient, and accurately differentiate them from other *Enterococci*.

“Knowledge of the type of resistance is critical for infection control purposes. Van A and Van B genes are transferable and can spread from organism to organism. In contrast, Van C genes are not transferable, have been associated less commonly with serious infections, and have not been associated with outbreaks” – from CDC guidelines

Vancomycin-resistant *Enterococcus* (VRE) infections are especially aggressive and have been associated with mortality rates approaching 60 % to 70 %.

Medium Performance

1 SIMPLE, FAST AND RELIABLE TOOL
for the direct detection of VRE strains with transmissible resistance: this is a precious help in the implementation of the appropriate control measures to prevent the spread of VRE.

2 INTENSE COLONY COLOURS
In CHROMagar™ VRE media, VRE. *faecalis* and VRE. *faecium* strains are easily distinguishable by the colony colour.

In the contrary, in the classical agar for the detection of VRE (Bile Esculine Agar supplemented with vancomycin) : (I) there is no differentiation between *E. faecalis*/*E. faecium* and the other *Enterococci*; (II) it often leads to false positives of other esculine hydrolysing bacteria (like *Lactococcus*, *Pediococcus*...); (III) the black “cloud” makes plate reading difficult as well as the choice of the proper colony for further confirmatory tests.

3 FLEXIBILITY
CHROMagar™ VRE is supplied with a more than 18 months shelf life. This allows for flexibility of use, whether in an epidemic situation with many patients to screen, or whether for random surveillance of cultures.

Medium Description

Powder Base	Total	67.3 g/L
	Agar	15.0
	Peptones & Yeast extract	20.0
	Salts	5.0
	Chromogenic mix	27.3
	Storage at 15/30 °C - pH: 6.9 ± 0.5	
	Shelf Life	> 18 months
+		
Supplement (Included in the pack)	Powder form	60 mg/L
	Storage at 2/8 °C	Shelf Life
		> 18 months

Usual Samples	stools and rectal swabs.
Procedure	Direct Streaking. Incubation at 35-37 °C, 24 h. Aerobic conditions.

Scientific Publications on this product: available on www.CHROMagar.com
Please read carefully the instructions for use (IFU document) available on www.CHROMagar.com




Order References

Please use these product references when contacting your local distributor:

- 5000 mL pack VR952
(included in this reference: powder base VR952(B) + supplement VR952(S))
- 10 kg pack VR953-10kg
(included in this reference: powder base VR953-10kg(B) + supplement VR953-150(S))

Manufacturer: CHROMagar
4 place du 18 juin 1940 75006 Paris - France
Email: CHROMagar@CHROMagar.com
Website: www.CHROMagar.com
Find your nearest distributor on
www.CHROMagar.com/contact

● CHROMagar™
VRE

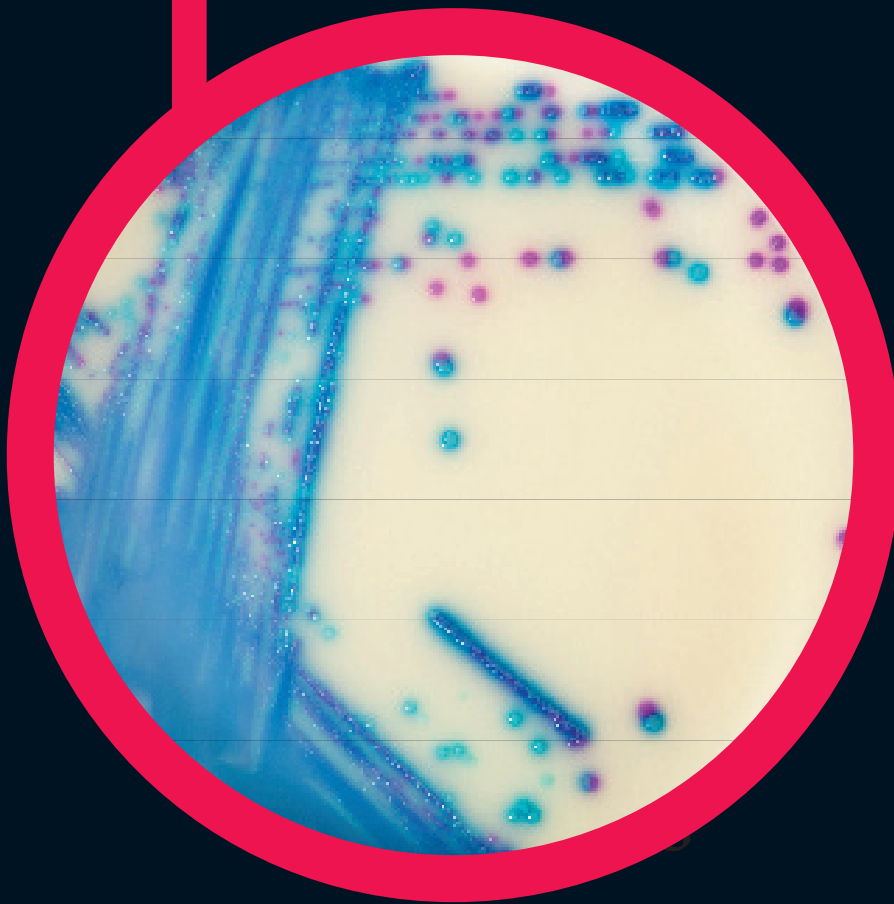


**Pour la détection des ERV *E. faecalis* &
E. faecium (Van A/Van B)**



Lecture

- ERV. *faecalis*/ERV. *faecium*
→ rose à mauve
- *E. gallinarum*/*E. casseliflavus*
→ bleu ou inhibé
- Autre bactérie
→ inhibé

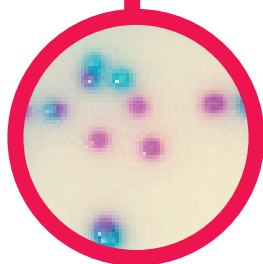

Pour la détection des ERV. *faecalis* & ERV. *faecium* (Van A/Van B)

Contexte

Il existe deux types de résistance à la vancomycine chez les entérocoques. Le premier type est la résistance intrinsèque (principalement de type Van C, mais aussi Van D, Van E, Van F, etc.) trouvée chez *E. gallinarum* et *E. casseliflavus*/*E. flavescens* et démontre une faible résistance à la vancomycine. Le deuxième type de résistance à la vancomycine chez les entérocoques est la résistance acquise (types Van A et Van B), observée principalement chez *E. faecium* et *E. faecalis*. Par conséquent, pour éviter la propagation de cette résistance à des agents pathogènes plus virulents (*S. aureus*, par exemple), il est crucial de détecter rapidement la présence de l'une ou l'autre de ces deux espèces chez le patient et de les différencier avec précision des autres entérocoques.

“La connaissance du type de résistance est essentielle à des fins de contrôle des infections. Les gènes Van A et Van B sont transférables et peuvent se propager d'un organisme à l'autre. En revanche, les gènes Van C ne sont pas transférables, ont été associés moins fréquemment à des infections graves et n'ont pas été associés à des épidémies.” – extrait des directives du CDC

Les infections aux entérocoques résistant à la vancomycine (ERV) sont particulièrement agressives et ont été associées à des taux de mortalité avoisinant les 60 % à 70 %.

Performance du milieu

1 OUTIL SIMPLE, RAPIDE ET FIABLE

pour la détection directe des souches de ERV à résistance transmissible : aide précieuse à la mise en œuvre des mesures de contrôle appropriées pour empêcher la propagation des ERV.

2 COULEURS DE COLONIE INTENSES

Dans CHROMagar™ VRE, ERV. *faecalis* et ERV. *faecium* se distinguent facilement par la couleur de la colonie.

Une gélose classique pour la détection des ERV (Bile Esculine Agar supplémentée en vancomycine): (I) il n'y a pas de différenciation entre *E. faecalis*/*E. faecium* et les autres entérocoques; (II) cela conduit souvent à des faux positifs avec d'autres bactéries hydrolysant l'esculine (comme les lactocoques, les pédiocoques ...); (III) le «nuage» noir rend la lecture de la boîte difficile ainsi que le choix de la colonie appropriée pour des tests de confirmation ultérieurs.

3 FLEXIBILITÉ

CHROMagar™ VRE est livré avec une durée de conservation de plus de 18 mois. Cela permet une flexibilité d'utilisation, que ce soit pendant une situation épidémique avec de nombreux patients à dépister, ou pour une surveillance aléatoire des cultures.

Description du milieu

Base en poudre	Total	67,3 g/L
	Agar	15,0
+	Peptones & extrait de levure	20,0
	Sels	5,0
Supplément (Inclus dans le pack)	Mix chromogénique	27,3
	Stockage à 15/30 °C - pH : 6,9 ± 0,5	
	Durée de conservation	> 18 months
	Poudre	60 mg/L
	Stockage at 2/8 °C Conservation	> 18 months

Échantillons habituels	selles et écouvillons rectaux.
Procédure	Ensemencement direct. Incubation à 35-37 °C, 24 h. Conditions d'aérobiose.
Publications scientifiques sur ce produit : disponibles sur www.CHROMagar.com Veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation (notices) disponibles sur www.CHROMagar.com	




Références pour commander

Veuillez utiliser ces références produits lorsque vous contactez votre distributeur local :


- Pack de 5000 mL VR952
(Inclus dans cette référence : base VR952(B) + supplément VR952(S))
- Pack de 10 kg VR953-10kg
(Inclus dans cette référence : base VR953-10kg(B) + supplément VR953-150(S))

Fabricant : CHROMagar
4 place du 18 juin 1940 75006 Paris - France
Email : CHROMagar@CHROMagar.com
Site web : www.CHROMagar.com
Trouvez votre distributeur le plus proche sur www.CHROMagar.com/contact

● CHROMagar™
VRE

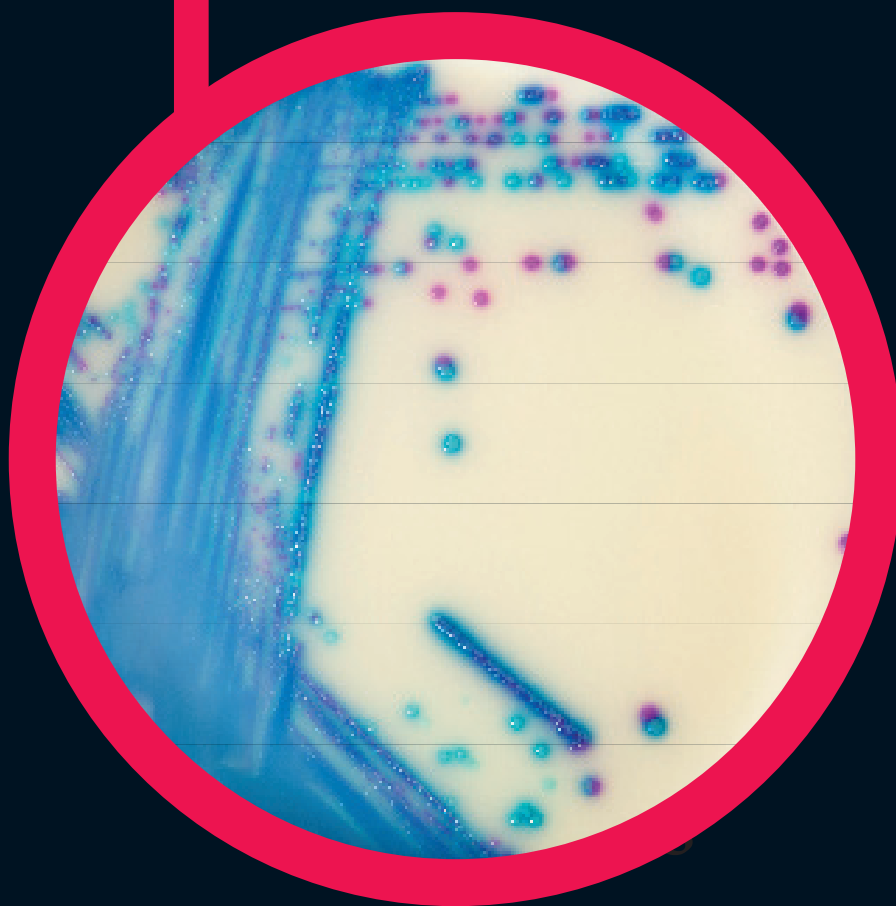


Para la detección
de *VRE.faecalis* & *VRE.faecium* Van A/Van B

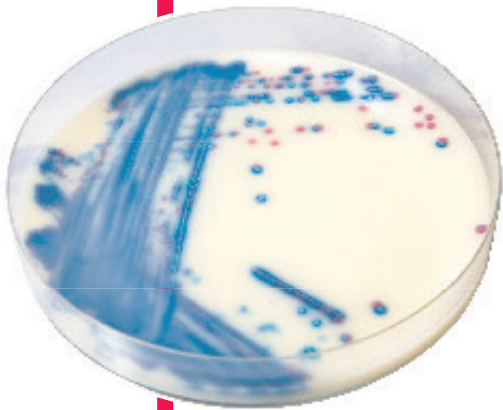

Lectura de placa

- VRE. *faecalis*/VRE. *faecium*
→ rosa a malva
- *E. gallinarum*/*E. casseliflavus*
→ azul o inhibida
- Otra bacteria
→ inhibida

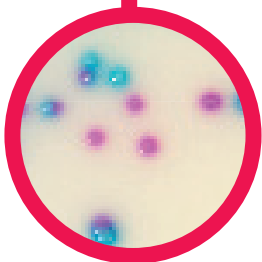

Para la detección de VRE. *faecalis* & VRE. *faecium* Van A/Van B

Antecedentes

Existen dos tipos de resistencia a la vancomicina en los enterococos. El primer tipo es una resistencia intrínseca (sobre todo Van C pero también Van D, Van E, Van F, etc) que se encuentra en *E. gallinarum* y *E. casseliflavus*/*E. flavescens* y muestra un bajo nivel de resistencia a la vancomicina. El segundo tipo de resistencia a la vancomicina en los enterococos es una resistencia adquirida (tipos Van A y Van B), encontrados sobre todo en *E. faecium* y *E. faecalis*. Por tanto, para evitar la propagación de esta resistencia a patógenos más virulentos (*S. aureus*, por ejemplo) es crucial la detección temprana en cualquiera de estas dos especies en el paciente, y diferenciarlas de manera precisa de otros enterococos.

“El conocimiento del tipo de resistencia es crítico para los propósitos de control de infecciones. Los genes Van A y Van B son transferibles y pueden extenderse de organismo a organismo. Por el contrario, los genes Van C s no son transferibles, se han asociado con menos frecuencia a infecciones graves, y no se han asociado con brotes.” Directrices del CDC.

Las infecciones de enterococos resistentes a la Vancomicina (VRE) son especialmente agresivas y se le atribuyen tasas de mortalidad de hasta 60 % y 70 %.

Rendimiento del medio

1 HERRAMIENTA SIMPLE, RÁPIDA Y FIABLE

Para la detección directa de cepas de VRE con resistencia transmisible: se trata de una valiosa ayuda en la implementación de las medidas de control apropiadas para evitar la propagación de VRE.

2 COLONIAS DE COLORES INTENSOS

Con CHROMagar™ VRE, las cepas de VRE. *faecalis* y VRE. *faecium* son fácilmente distinguibles por el color de las colonias.

Por el contrario, con el agar clásico para la detección de VRE (agar Bilis Esculina suplementado con Vancomicina): (I) no hay diferenciación entre VRE. *faecalis*/VRE. *faecium* y otros *Enterococos*; (II) a menudo conduce a falsos positivos en otras bacterias que hidrolizan esculina (*Lactococcus*, *Pediococcus*...); (III) la “nube” negra dificulta la lectura de la placa y la elección de la colonia adecuada para los ensayos de confirmación posteriores.

3 FLEXIBILIDAD

CHROMagar™ VRE se suministra con una vida útil más de 18 meses. Esto permite la flexibilidad de uso, ya sea en una situación de epidemia con el control de muchos pacientes, o para la vigilancia aleatoria de cultivos.

Descripción del medio

Base en polvo	Total	67,3 g/L
	Agar	15,0
+	Peptona y extracto de levadura	20,0
	Sales	5,0
Suplemento (incluido en el envase)	Mezcla cromogénica	27,3
	Almacenamiento a 15/30 °C - pH: 6,9 ± 0,5	
	Vida útil	> 18 months
	Powder form	60 mg/L
	Almacenamiento a 2/8 °C	Vida útil > 18 months

Muestras habituales	heces y hisopos rectales.
Procedimiento	Siembra directa. Incubación a 35-37 °C, 24 h. Condiciones aeróbicas.

Publicaciones científicas sobre este producto disponibles en www.CHROMagar.com
Por favor lea cuidadosamente las instrucciones de uso (documento IFU) disponibles en www.CHROMagar.com



Información para hacer pedidos

Gracias por utilizar las siguientes referencias al consultar a su distribuidor :

Envase de 5000 mL VR952

(Referencia compuesta de: base en polvo VR952(B) + suplemento VR952(S))

Envase de 10 kg VR953-10kg

(Referencia compuesta de: base en polvo VR953-10kg(B) + suplemento VR953-150(S))

Fabricante: CHROMagar

4 place du 18 juin 1940 75006 Paris - France

Email: CHROMagar@CHROMagar.com

Sitio web: www.CHROMagar.com

Encuentre su distribuidor más cercano en:

www.CHROMagar.com/contact